

認知症などによる不意のお出かけを知らせる「見守り」サービス



CareArea

電子見守りシステム[ケアレア]



「電子見守りシステム CareArea(ケアレア)」は、
あなたの大切な方が、
あなたの近くを離れた事をお知らせをするサービスです。

こんな心配の
経験
ありませんか？

①ヒヤリ・ハット

あっ、いない!!



あれ? 「いってきます」忘れてる?
不意のお出かけ?

気づいたらいない! とならないように、
「ケアレア」が未然に防ぎます。

②行方不明・捜索

どこ行ったの?
事故に遭ってい
たらどうしよう?!

暑い...
家はどこだ?



あなた(介護者)の安心で
穏やかな日々が、
大切な方の
穏やかな日々につながります。

③家族(介護者)の不安と疲労

私が寝てる
間に外出し
ないかしら?

一瞬も目が離せない。
少くらしい休ませて。
私が倒れそう




電子見守りシステム：ケアレアの主な機能

◆見守りエリアからの逸脱検知機能

【自宅内・見守り中のイメージ】

注：色枠内=見守りエリアの範囲と仮定
(およそ10~15m : 3LDK想定)

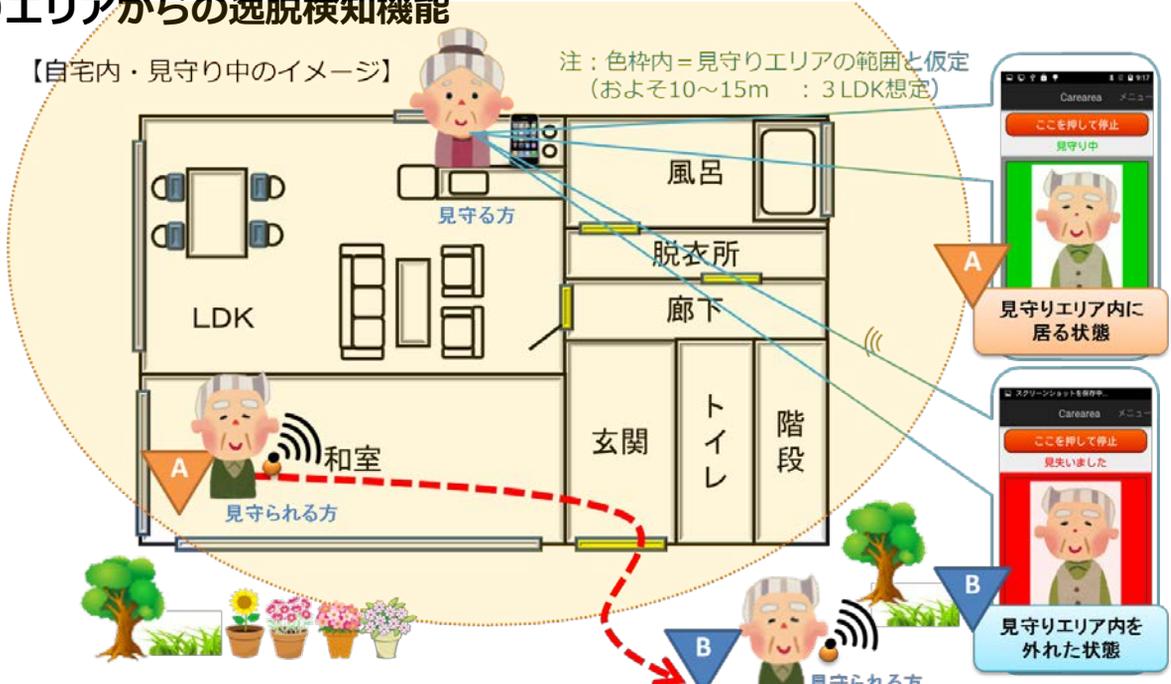

- A** 見守りシーンA (見守り中) : 見守る方 (おばあちゃん) が離れた台所で料理をしていても和室でくつろいでいる見守られる方 (おじいちゃん) を見守っています。
- B** 見守りシーンB (逸脱) : おじいちゃんが見守りエリア外に出た事を、アラームが鳴り、見守る方にお知らせします。

【CareArea(ケアレア) サービスの構成と利用方法】

小型発信機 1 個と受信機 1 台で、簡単に「見守り」を開始することができます。発信機の電波が受信できなくなった時、アラーム音で介護者に通知します。

- ・おおよそ 3 LDK 程の自宅フロア内ならば、網羅できる想定です。
- ・一緒に同行するお散歩やお出掛けをしながらの見守りもできます。



【小型発信機】

見守られる方が、身に付けたり、持ち物に装着します。

- ・装着方法は、ペンダント、リストバンド、カバン等、いろいろ工夫する事ができます。

【受信機】

見守る方が、所持するか、アラームが聞こえる場所に据え置きます。

- ・受信機となる専用端末が必要です。(レンタル)
- ・wi-Fi等の通信環境が無くても利用できます。

お問合せまたはご不明点がございましたら
お気軽にご相談ください。

株式会社 国建システム

お問い合わせ先
(ケアレア担当)

TEL:098-867-7584

FAX:098-866-5965

http://www.kunisys.co.jp

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20 OTV国和プラザ8F